

3M™ Soft Cast
Semirigidní fixační obvaz
3M Imobilizace



Funkční,
komfortní, v
prověřený



3M

3M™ Soft Cast

... jedinečný materiál poskytující alternativní a lepší ošetření

Výhody funkčního znehybnění oproti klasické rigidní imobilizaci jsou dobře známy.*

* Odborné studie a materiály na vyžádání u zástupců společnosti 3M.



- Pomáhá snižovat riziko svalové atrofie, ztuhlosti kloubů, změn a úbytku kloubní chrupavky.
- Umožňuje zkrácení celkové doby rehabilitace, protože svaly i šlachy zůstávají funkční a elastické a k znehybnění dochází jen v místech, kde je ho zapotřebí.
- Rychlejší redukce otoků pomocí dynamického tlaku.
- Bezkonkurenční stabilita a podpora postiženého úseku významně snižující bolestivost a usnadňující proces hojení.

3M Soft Cast

... alternativní materiál

3M Soft Cast je tkaný materiál napuštěný vodou aktivovatelnými pryskyřicemi. Zůstává polotuhý a ohebný, takže poskytuje funkční oporu při léčbě poranění měkkých tkání a při aplikaci ortopedických castů.

3M Soft Cast

... lepší ošetření

3M Soft Cast je speciálně navržen k tomu, aby lékař mohl zvolit úroveň tuhosti potřebnou ke stabilizaci konkrétní zlomeniny / místa poranění a umožnil tak ostatním částem končetiny fungovat co nejlépe. Je snadné ho jak vytvořit, tak sejmout,


má všestranné použití a poskytuje pacientům nebývalý komfort. Uživatelům - zdravotníkům nabízíme širokou podporu a školení: výuková centra v nemocnicích, výukové materiály, příručku a CD-Rom s názvem "Práce se Soft Castem" ("Working with 3M Soft Cast").



Obvaz dokonale přiléhá
Není potřeba podkládat vatou.



Variabilní opora
Při použití dlahy 3M Scotchcast Longuette nebo 3M Scotchcast Plus a fixačního obvazu 3M Soft Cast je možno cíleně stabilizovat problematické oblasti.

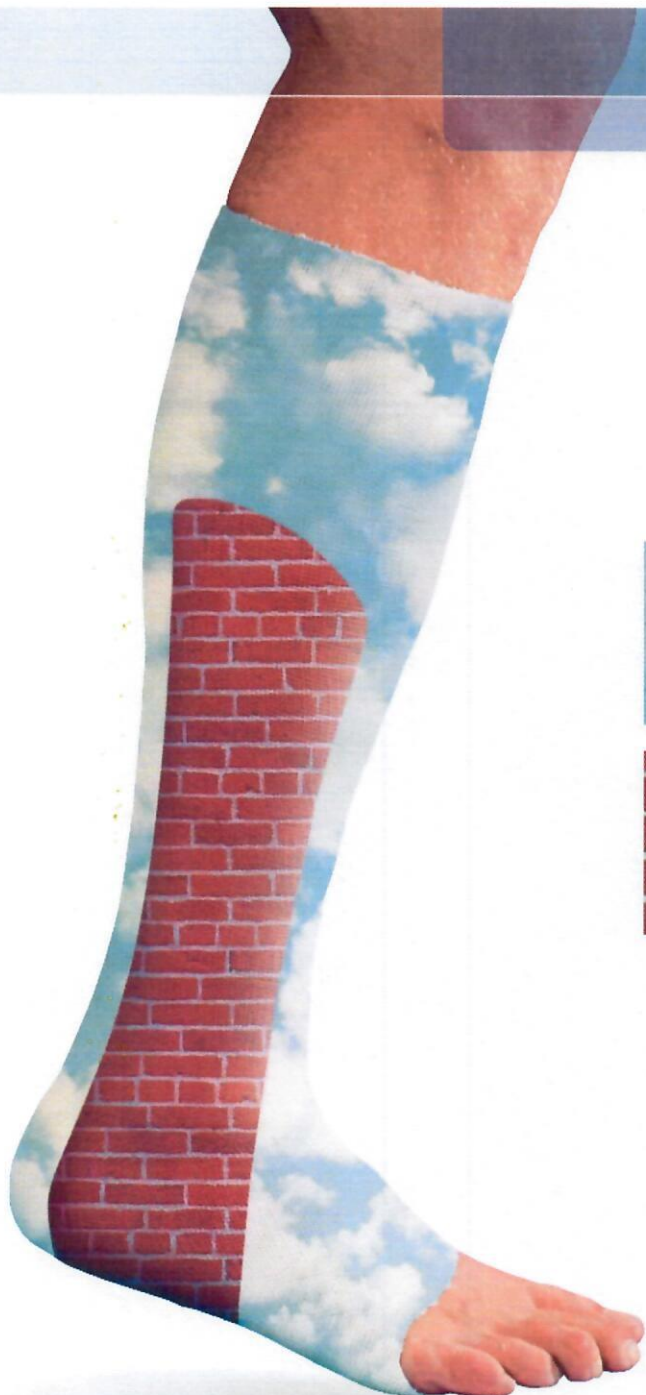

Polotuhá fixace

(3M Soft Cast)

V této úpravě si svaly a šlachy zcela zachovávají svoji funkčnost.



Tuhá fixace

(3M Soft Cast vyztužený dlahou 3M Scotchcast Longuette nebo 3M Scotchcast Plus)

Tato úprava umožňuje úplnou stabilizaci – znehybnění.



Pohyblivost

Výrobek dává pacientovi tolik možnosti pohybu, kolik je potřeba k prevenci ztuhlosti kloubů a k rychlejšímu hojení.



Funkční opora

Díky měkkým okrajům a přiléhavosti při aplikaci dává Soft Cast ideální funkční oporu.



Snadné snímání

3M Soft Cast lze odmotat anebo rozstříhnout pomocí speciálních nůžek. Důležité zejména u dětí nebo pro následné využití castů jako snímatelné podpory (ortézy).

Informace pro objednání

Výrobek	Katalogové číslo	Velikost	Ks / balení
3M™ Soft Cast	82101*	2.5 cm x 1.8 m	10 rolí
	82102*	5.0 cm x 3.6 m	10 rolí
	82103*	7.6 cm x 3.6 m	10 rolí
	82104*	10.1 cm x 3.6 m	10 rolí
	82105	12.7 cm x 3.6 m	10 rolí
Při objednávání barevných fixačních obvazů 3M Soft Cast nahradte hvězdičku * písmenem určeným pro danou barvu: modrá: B, purpurová: U, červená: R			
3M™ Scotchcast™ Longuette - dlaha	82199	5.0 cm x 20 cm	10 longet
	82299	7.6 cm x 20 cm	10 longet
	82200	7.6 cm x 70 cm	10 longet
	82201	10.1 cm x 90 cm	10 longet
	82202	12.7 cm x 90 cm	10 longet
	82203	7.6 cm x 45 cm	10 longet
3M™ Microfoam™ pěnová náplast	1528-1	2.5 cm x 5.0 m	12 rolí
	1528-2	5.0 cm x 5.0 m	6 rolí
	1528-3	7.6 cm x 5.0 m	4 role
	1528-4	10.1 cm x 5.0 m	3 role
3M™ Adheban™ Plus samolepicí elastická bandáž	2987 AM	3.0 cm x 2.5 m	1 role
3M™ Reston™ samolepicí pěna	1563L	0.5 cm x 10 cm x 4.6 m	1 role
3M™ Scotchcast™ Stockinette - podkladová punčocha	MS01	2.5 cm x 22.8 m	1 role
	MS02	5.0 cm x 22.8 m	1 role
	MS03	7.6 cm x 22.8 m	1 role
	MS04	10.1 cm x 22.8 m	1 role
	MS06	15.2 cm x 22.8 m	1 role
	MS08	20.3 cm x 22.8 m	1 role
	MS10	25.4 cm x 22.8 m	1 role
	MS12	30.5 cm x 9.1 m	1 role
Polypropylenový pásek	FBW1	19 mm x 20.0 m	1 role
Upínací přezky	FBB2	19 mm	50 kusů
Suchý zip s háčkem samolepicí	57938	50 mm x 25.0 m	N/A
Suchý zip s háčkem	57946	50 mm x 25.0 m	N/A
Suchý zip s poutkem samolepicí	57953	50 mm x 25.0 m	N/A
Suchý zip s poutkem	57995	50 mm x 25.0 m	N/A
Sada suchých zipů s háčky a poutky	69677	50 mm x 2.0 m	N/A
Patentní knoflíky	PK 08	8.0 mm	100 kusů
	PK 10	10.0 mm	100 kusů
	PK 12	12.5 mm	100 kusů
	PK 15	15.0 mm	100 kusů
Nůžky na obvaz 3M™ Soft Cast	23286	18.0 cm	1

Obsažené látky

3M Soft Cast: polyuretanová pryskyřice (PUR), nosná tkanina; obal: hliní/polypropylen.

Pokyny pro likvidaci

3M Soft Cast lze za předpokladu ztuhnutí materiálu likvidovat jako průmyslový odpad podobný domovnímu odpadu.

V opačném případě je nutné ho likvidovat jako zvláštní odpad. Při řádném spalení nebo uložení nevznikají žádné látky ohrožující životní prostředí.



3M Česko, spol. s r.o.

V Parku 2343/24

148 00 Praha 4

Tel: (420) 261 380 111

Fax: (420) 261 380 110

www.3M.cz/lehkasadra

Prosíme recyklujte.

3M, Adheban, Microfoam, Reston, Scotchcast a Soft Cast jsou ochranné známky společnosti 3M.

© 3M 2012.

1260-101-EU JK/Graphix